

## ! EEN NIEUWE CONFIRMATIE TEST VOOR BORRELIA !

### DE EUROIMMUN EUROLINE ANTI-BORRELIA RN-AT

In Mei 2008 bracht EUROIMMUN AG een nieuwe innovatieve immunoblot test uit voor de confirmatie van Borreliose. Deze nieuwe **anti-Borrelia EUROLINE RN-AT**, beschikbaar voor IgG en IgM, maakt gebruik van hoogspecifieke opgezuiverde natieve en recombinante antigenen in combinatie met specifieke lipiden.

Deze antigenen en lipiden, afkomstig van verschillende *Borrelia* species (*B. burgdorferi*, *B. garinii* en *B. afzelii*), werden geselecteerd op basis van hun **specificiteit**. De nieuwe anti-Borrelia EUROLINE RN-AT, waarbij de antigenen individueel aangeboden worden op de cellulose strip, is tevens gekenmerkt door een maximale sensitiviteit. Ook is de aflezing van deze EUROLINE strips eenvoudiger in vergelijking met een Western blot.

De **EUROBlotMaster** laat U toe alle EUROLINE, EUROLINE-WB en Western blot testen (maximaal 30 per run) van de firma EUROIMMUN optimaal te automatiseren volgens het *walk-away* principe.

Het software programma **EUROLINEscan** is de complete oplossing voor de automatische aflezing en interpretatie van alle EUROIMMUN EUROLINE, EUROLINE-WB en Western blot testen, de rapportage van de resultaten en de digitale archivering ervan.

De **2-steps strategie voor de diagnostiek van Borreliosis** raadt een sensitieve screening aan met behulp van een ELISA test gevolgd door een confirmatietest met een specifieke immunoblot. Om aan deze procedure te voldoen stellen BIOGNOST en EUROIMMUN U de volgende producten voor:

#### Sensitieve screening:

- ELISA IgG (mengsel van *B. burgdorferi*, *B. garinii* en *B. afzelii* + VlsE)
- ELISA IgM (mengsel *B. burgdorferi*, *B. garinii* en *B. afzelii*)

Afzonderlijke ELISA testen voor detectie in cerebro-spinaal vocht zijn eveneens beschikbaar.

Vernoemde ELISA testen kunnen ook volledig geautomatiseerd worden op **EuroAnalyzer-I**, **DSX** of **DS2**.


#### Specifieke confirmatie:

- **Anti-Borrelia EUROLINE RN-AT IgG en IgM**

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere informatie en vragen rond deze EUROIMMUN Borrelia producten.

Met vriendelijke groeten,

Het BIOGNOST Diagnostics team

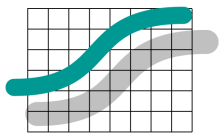

**BIOGNOST**

# Antwoordkaart Borrelia

**Augustus 2008**

Wenst u meer informatie, gelieve deze antwoordkaart terug te sturen naar:

**BIOGNOST – Watervan 11 – B-8501 Heule, België**  
**Fax: +32(0)56 35 33 97**

**O Ik wens meer informatie te ontvangen omtrent:**

- ◇ Borrelia-screening ELISA
- ◇ Borrelia-confirmatie blottesten
- ◇ Dosering in cerebrospinaal vocht
- ◇ Automatisatie

**O Ik wens het bezoek van een product specialist**

**Mijn gegevens:**

Labo / Instituut: \_\_\_\_\_  
Afdeling: \_\_\_\_\_  
Titel: \_\_\_\_\_  
Voornaam: \_\_\_\_\_  
Familiennaam \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Postcode /  
Gemeente: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_